

JOBST®



JOBST® kompressionsstrumpor
För alla tillfällen - enligt tysk standard RAL



Varför JOBST kompressionsstrumpor?

JOBST medicinska kompressionsstrumpor lindrar trötta och värkande ben, förebygger svullnad och är en effektiv behandling vid venösa och lymfatiska besvär.

JOBST kompressionsstrumpor är unika eftersom de är utvecklade specifikt för kvinnor och män som har behov av en effektiv graderad kompression, men som önskar stil och komfort.

JOBST kompressionsstrumpor tillför rekommenderad kompression till dina ben. Det är detta vi kallar graderad kompression, eftersom kompressionen är högst vid ankeln och avtar uppöver benet. JOBST kompressionsstrumpor medverkar till bättre blodgenomströmning i benen.


JOBST kompressionsstrumpor finns tillgänglig i flera kompressionsklasser, färger, modeller och kvaliteter, och kan användas vid alla tillfällen.

Problem med venerna?


Friska ben har vener med glatta och elastiska väggar som är perfekta för att anpassa sig efter förändringar i trycket i venerna. Venklaffarna hjälper blodet att transporteras i rätt riktning - mot hjärtat. En aktiv vadmuskulatur hjälper flödet uppåt. Om väggarna i venerna har blivit förstörda av åderbräck eller trombos (blodpropp) kommer venerna utvidga sig så att de inte stänger sig som de skall.

I upprest position kan blodet, som egentligen skall transporteras tillbaka till hjärtat, stagnera i benen. Trycket i de ytliga venerna precis under huden ökar och det uppstår en svullnad. Det vanligaste symptomen är trötta och värkande ben, särskilt om man står upp längre tid.

Efter ett tag kan det också samlas vätska i fötter och anklar med påföljande ödem. Huden över anklarna blir tunnare och missfärgad och venösa bensår kan utvecklas. JOBST kompressionsstrumpor förebygger detta.

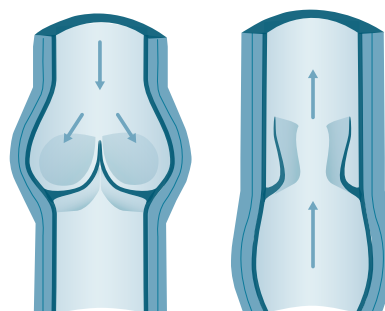

Friska vener

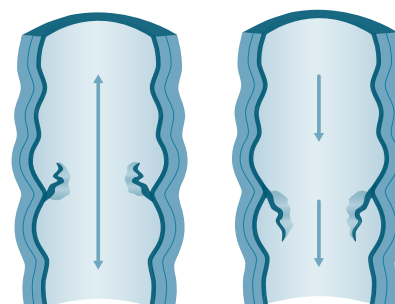

Skadade vener

Graviditet

ökad belastning för venerna

Det venösa systemet utsätts för ökad belastning under graviditet. Större mängd blod måste transporteras samtidigt som den höga koncentrationen av progesteron påverkar venerna negativt. Hormonerna förslappar bindväven - vilket är viktigt inför födseln, men inte bra för benen. Även den växande livmoderns ökade tryck på venerna vid bäckenet minskar blodets möjlighet att komma tillbaka till hjärtat.

Det är vanligt att åderbräck uppstår i samband med graviditet, men ofta går de helt eller delvis bort efter den första födseln. Varje ny graviditet ökar risken för venösa problem. JOBST kompressionsstrumpor förebygger detta.



JOBST® UltraSheer - RAL

Tunn, transparent och elegant kompressionsstrumpa.

- Silkesmjuk och glansig
- Med och utan tå
- Silikonkant - lårstrumpa AG
- Finns som standard och måttsydd
- Innehåll: polyamid, elastan


Kompressionsklass

Klass 1 - 18-21 mmHg¹

Klass 2 - 23-32 mmHg¹



Modeller

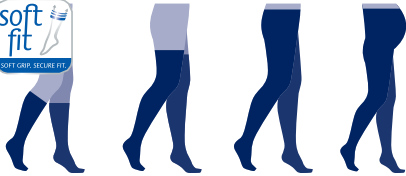

AD

AG

AT

AT/UM


Färger




Natural




Golden
Beige

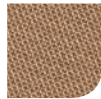


Caramel

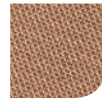


Tan

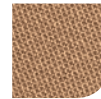


Bronze

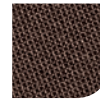


Espresso

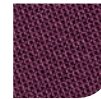

Cranberry

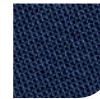

Navy

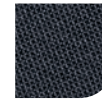

Anthracite



Black

JOBST® Opaque - RAL

Mjuk, tålig och täckande kompressionsstrumpa för alla tillfällen.

- Hudvänlig och slitstark
- Enkel att ta på
- Mjukt brett avslut vid knät
- Med och utan tå
- Silikonkant - tillgänglig i knä och lårstrumpa
- Finns som standard och måttsytt
- Innehåll: polyamid, elastan

Kompressionsklass


Klass 1 - 18-21 mmHg¹

Klass 2 - 23-32 mmHg¹

Klass 3 - 34-46 mmHg¹



Modeller

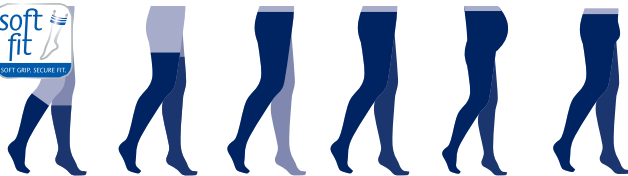

AD

AG/AF

AG-T

AT

AT/UM

AT/Herr

Färger



Natural



Golden
Beige



Caramel



Tan



Bronze




Espresso



Cranberry



Navy

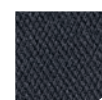

Anthracite



Black

JOBST® forMen Ambition - RAL

**Elegant kompressionsstrumpa med diskret mönster.
Lite tunnare än forMen Explore.**

- Mycket god passform
- Balanserad mix av material gör strumpan lätt att ta på
- En kombination av material reglerar effektivt fukt och motverkar dålig lukt
- Finns som standard
- Innehåll: polyamid, elastan, bomull, polyester

Kompressionsklass

Klass 1 - 18-21 mmHg¹

Klass 2 - 23-32 mmHg¹

Klass 3 - 34-46 mmHg¹

Modeller



AD

Färger



Svart

Mörkgrå

Brun

Navy

Khaki



JOBST® forMen Explore - RAL

Ribbstickad kompressionsstrumpa. Lite kraftigare än forMen Ambition.

- Mycket god passform
- Den höga bomullshalten ger en torr och bekväm känsla
- En kombination av material reglerar effektivt fukt och motverkar dålig lukt
- Finns som standard
- Innehåll: polyamid, elastan, bomull, polyester

Kompressionsklass

Klass 1 - 18-21 mmHg¹

Klass 2 - 23-32 mmHg¹

Klass 3 - 34-46 mmHg¹

Modeller



AD

Färger



Svart

Mörkgrå

Navy

Khaki



JOBST® Classic - RAL

En lite kraftigare och täckande kompressionstrumpa som passar både män och kvinnor.

- Mjuk och tålig
- Förstärkt vid häl, tå och fotsula
- Mjukt brett avslut vid knät
- Knästrumpa finns även som ribbstickad
- Med och utan tå
- Unisex
- Silikonkant - tillgänglig i knä och lårstrumpa
- Finns som standard och måttsytt
- Innehåll: polyamid, elastan


Kompressionsklass

Klass 2 - 23-32 mmHg¹

Klass 3 - 34-46 mmHg¹



Modeller

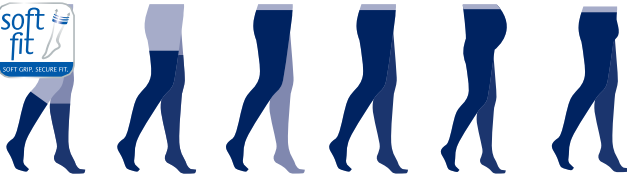

AD

AG

AG-T

AT

AT/UM

AT/Herr

Färger



Sand

Perle

Topas

Ribbstickat
Antracit*

Ribbstickat
Svart*

Svart

* finns bara som AD

Skötsel och tvättråd

Strumporna tas på direkt på morgonen och av på kvällen. Som hjälpmedel vid på- och avtagning av strumpan rekommenderas gummihandskar med noppor. Detta förlänger även hållbarheten på strumpan.

Det är viktigt med fotvård. Torr och hård hud kan skada strumporna. Använd gärna en fet kräm (ej oljebaserad) på kvällen. Även smycken, naglar samt skor med trasiga hälkappor kan skada strumporna.

Tvättråd

Strumporna tvättas i 40 grader. Undvik sköljmedel. Det fungerar även att tvätta strumporna för hand med ett mildt tvättmedel, men vrid inte ur vattnet, då detta kan förstöra fibrerna i strumpan. Torka inte strumporna i direkt solljus, eller på för stark värme.

Generellt

Om strumporna går sönder - försök inte att laga dessa själv. Det kan påverka kompression och passform.


Kompressionen håller vid daglig användning i 6 månader. Därefter bör man byta strumporna, för att säkra rätt kompressionsnivå.

Spara gärna förpackningen eller notera strumpans namn, kompressionsklass och storlek. Det gör det enklare vid köp av nästa strumpa.



Måttabeller

Måttabell JOBST® UltraSheer/Opaque/Classic

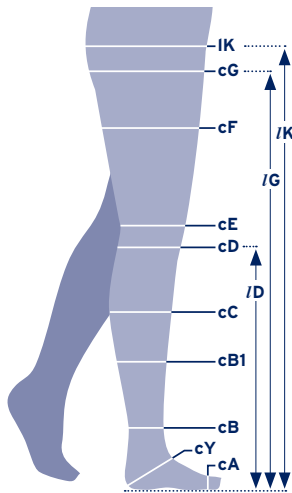

Omkrets i cm

Mått	Storlek					
	I	II	III	IV	V	VI
cG silikonkant normal	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68
cG silikonkant, extra vidd*	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81
cG utan silikonkant	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81
cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73
cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51
cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48
cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49
cB1	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34

* Extra vidd för lår med större omkrets. OBS! Beskriver ej bredden på silikonkanten.

Längdmått:

AD
 ID kort (petite): 34-39 cm
 ID normal (regular): 39-45 cm

AG

IG kort (petite): 60-69 cm
 IG normal (regular): 70-80 cm
 IG lång (long): 81-90 cm (Gäller JOBST Classic)


AT/AG-T

IK kort (petite): 65-75 cm
 IK normal (regular): 75-85 cm

Maxi-byxdel rekommenderas från (Gäller ej JOBST Classic):

Storlek I: Midja från 80 cm, höft från 95 cm
 Storlek II-III: Midja från 90 cm, höft från 105 cm
 Storlek IV-V: Midja från 110 cm, höft från 125 cm
 Storlek VI: Midja från 120 cm, höft från 135 cm

Måttabell JOBST® forMen Ambition/Explore

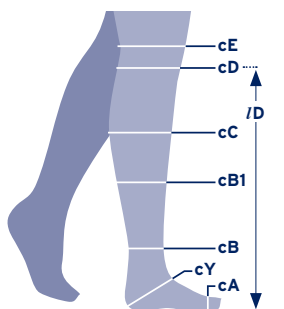

Omkrets i cm

LängdMått	Storlek					
	I	II	III	IV	V	VI
cD	28-34	31-38	34-41	37-46	40-49	42-52
cC	30-36	32-40	34-43	38-47	40-50	43-53
cB1	23,5-27,5	26-30,5	28,5-33	31-36,5	33,5-39	35,5-41,5
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30

Längdmått:

ID regular: 39-45 cm
 ID long: 45-51 cm

Terapiguide

Denna guide ger en enkel översikt av vilken strumpa som passar olika behov.

Kompressionsklass

Klass 1 - 18-21 mmHg¹

Trötta och ömmande ben. Lättare svullnader på ankel, vad och fötter. Lättare åderbråck samt åderbråck i samband med graviditet. Efter kirurgi på benen.

Klass 2 - 23-32 mmHg¹






Moderata till svåra åderbråck och åderbråck i samband med graviditet. Förebyggande av venösa bensår. Kronisk venös insufficiens. Moderata till svåra ödem.

Klass 3 - 34-46 mmHg¹

Svåra åderbråck, svåra ödem och lymfödem. Behandling och förebyggande av återkommande venösa bensår. Kronisk venös insufficiens.

1) Kompressionstryck genomsnittligt ankelomfång.

Knä- och lårbandsvarianter standardstrumpor

	French Bijou	Noppe	Decorative	Sensitive	Softfit™
					
Lårstrumpor					
JOBST® UltraSheer	•		•	•	
JOBST® Opaque	•	•		•	
JOBST® Classic		•			
Knästrumpor					
JOBST® UltraSheer					•
JOBST® Opaque		•			•
JOBST® Classic		•			•

Vid måttstytt kan vissa modeller ha fler val av silikonkanter. Se jobstonline.se för mer information.